


# SONDA DE ALEITAMENTO NEONUTRI GMI

## SGA - LINHA DIGESTÓRIA ENTERAL

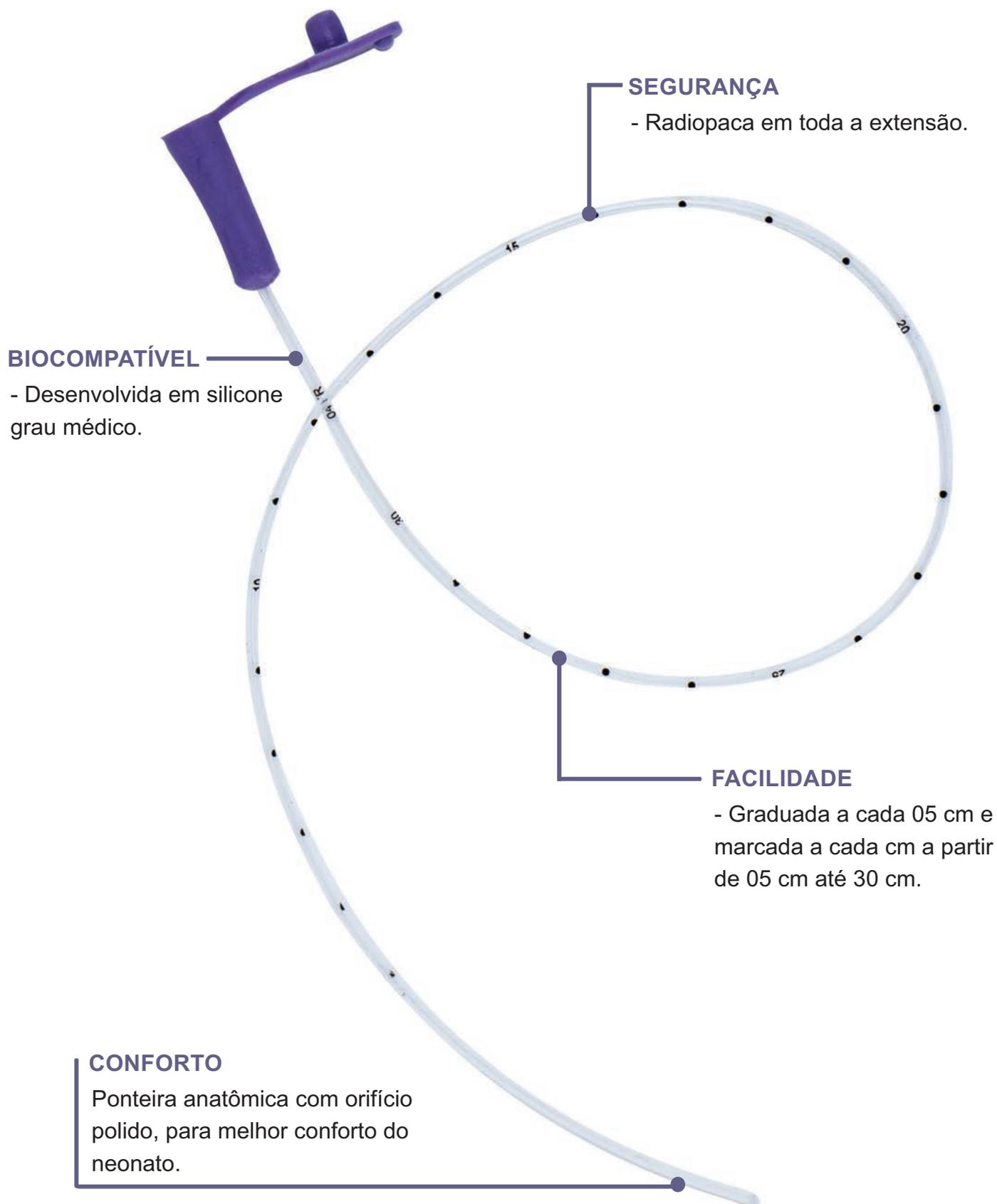

### SEGURANÇA

- Radiopaca em toda a extensão.

### BIOCOMPATÍVEL

- Desenvolvida em silicone grau médico.

### FACILIDADE

- Graduada a cada 05 cm e marcada a cada cm a partir de 05 cm até 30 cm.

### CONFORTO

Ponteira anatômica com orifício polido, para melhor conforto do neonato.

A SONDA  
NEONUTRI GMI,  
POSSUI  
TAMANHO  
ADEQUADO PARA  
ATENDER AS  
NECESSIDADES  
DE  
ALEITAMENTO  
DO NEONATO.  
MATERIAL EM  
SILICONE MAIS  
CONFORTÁVEL,  
QUE PERMITE  
PASSAGEM  
MENOS  
TRAUMÁTICA.

### DURABILIDADE

- Conector em silicone resistente a deformação e ruptura.

### CARACTERÍSTICAS

- Confeccionada em 100% de silicone grau médico.
- Conector em silicone com coloração diferenciada de fácil identificação, com entrada universal.
- Graduada em sua extensão.
- Ponteira anatômica com orifício polido, para melhor conforto do neonato.
- Linha radiopaca.
- Estéril.

### INDICAÇÃO

A alimentação enteral através da sonda gástrica de aleitamento Neonutri GMI, tem como finalidade suprir as necessidades nutricionais e alimentares do neonato na impossibilidade da amamentação, por imaturidade ou por incapacidade de coordenar sucção, deglutição e respiração.

SGA   SONDA GÁSTRICA DE ALEITAMENTO NEONUTRI					
Registro ANVISA nº 80423549004					
Código	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	VOLUME INTERNO (ml)	Comprimento (cm)
SGA-04	04	1,40	0,75	0,20	30
SGA-06	06	2,00	1,00	0,40	30